


单腔取卵器

注册证编号：鲁械注准20152180129

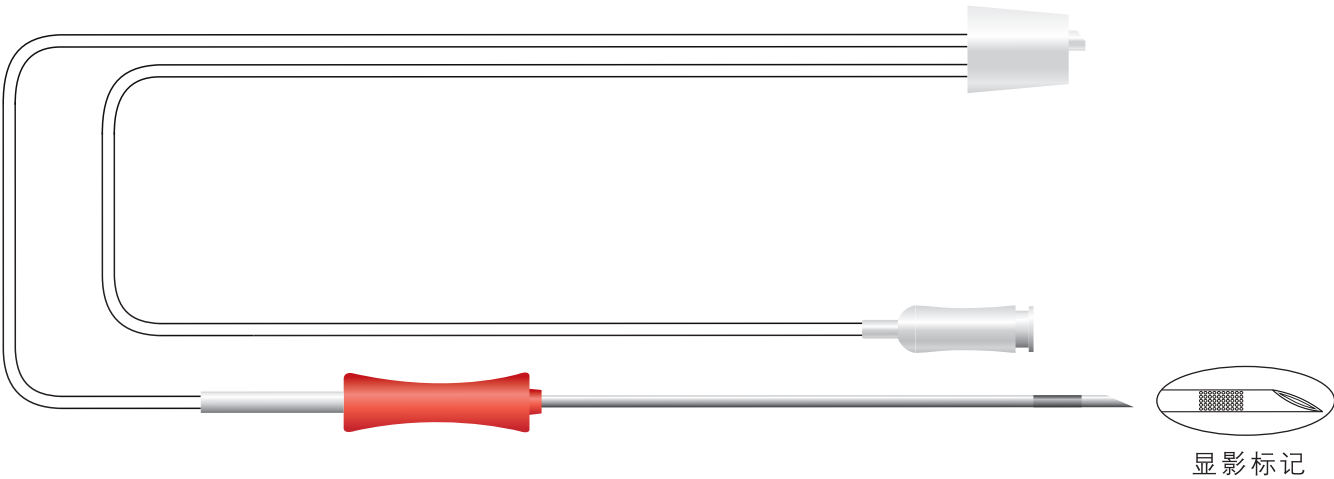

显影标记

适用范围：

主要用于经腹部或阴道超声引导下穿刺卵泡收集卵子。

产品特点：



笔尖式针头异常锐利，减少疼痛、利于创口恢复。



针头端清晰的显影标记，增强超声下的可视性。



手柄设计方便旋转操纵针尖，拇指凹槽指示针尖的斜面方向。



连接管弹性良好，运输或操作中产生折叠后可恢复原状。



双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

PRODUCT PARAMETER						
产品型号	穿刺针直径(G)	穿刺针长度(cm)	收集管长度(cm)	负压连接管长度(cm)	特点及说明	包装
C-351660-SL	16	35	60	100	与负压吸引器配合使用	单支独立无菌包装 10支/盒
C-351760-SL	17	35	60	100	与负压吸引器配合使用	
C-351860-SL	18	35	60	100	与负压吸引器配合使用	
C-351960-SL	19	35	60	100	与负压吸引器配合使用	
C-352060-SL	20	35	60	100	与负压吸引器配合使用	




微信公众号



官方网站

单腔取卵器

注册证编号：鲁械注准20152180129

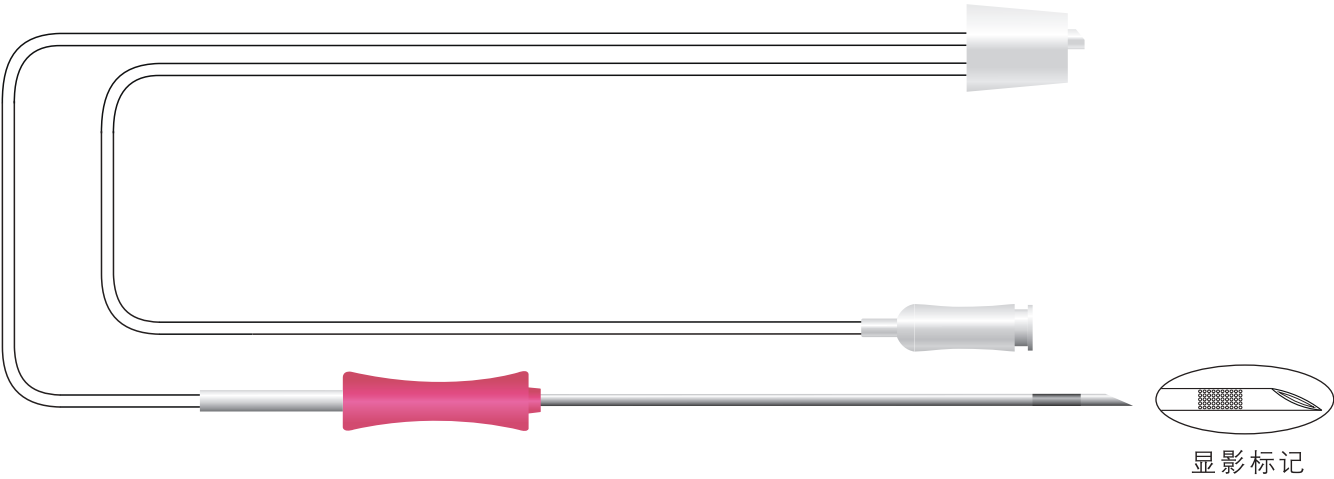

适用范围：

主要用于经腹部或阴道超声引导下穿刺卵泡收集卵子。

产品特点：



笔尖式针头异常锐利，减少疼痛、利于创口恢复。



针头端高清晰的显影标记，增强超声下的可视性。



手柄设计方便旋转操纵针尖，拇指凹槽指示针尖的斜面方向。



连接管弹性良好，运输或操作中产生折叠后可恢复原状。



双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。


PRODUCT PARAMETER

产品型号	穿刺针直径(G)	穿刺针长度(cm)	收集管长度(cm)	负压连接管长度(cm)	特点及说明	包装
C-351790-SL	17	35	90	68	与负压吸引器配合使用	单支独立无菌包装，10支/盒



单腔取卵器

注册证编号：鲁械注准20152180129

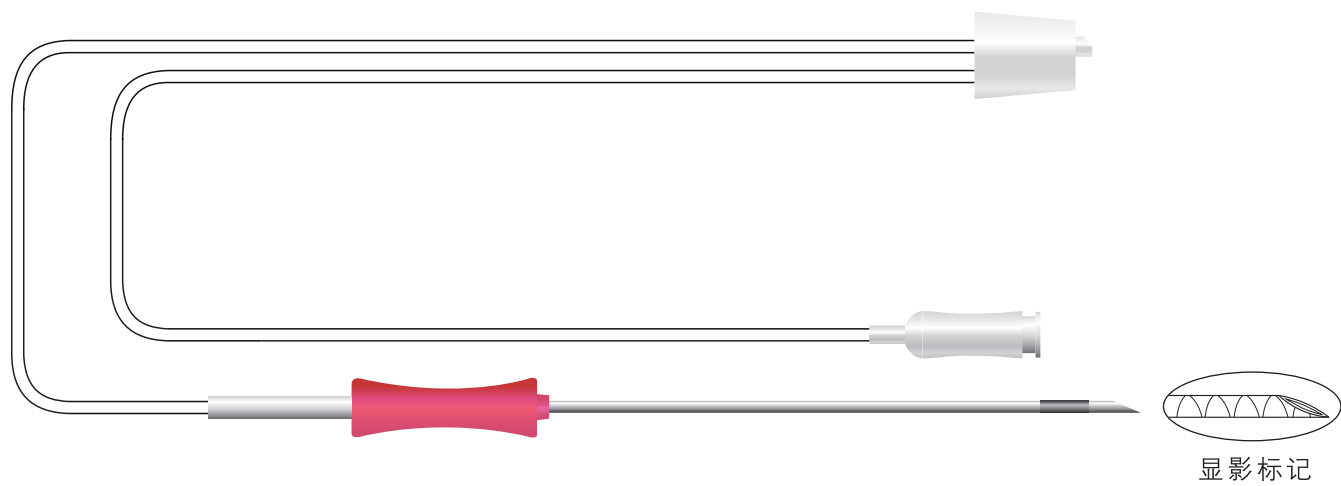

适用范围：

主要用于经腹部或阴道超声引导下穿刺卵泡收集卵子。

产品特点：

笔尖式针头异常锐利，减少疼痛、利于创口恢复。

针头端高清晰的显影标记，增强超声下的可视性。

手柄设计方便旋转操纵针尖，拇指凹槽指示针尖的斜面方向。

连接管弹性良好，运输或操作中产生折叠后可恢复原状。

双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

PRODUCT PARAMETER						
产品型号	穿刺针直径(G)	穿刺针长度(cm)	收集管长度(cm)	负压连接管长度(cm)	特点及说明	包装
C-301790-SL	17	33	90	68	与负压吸引器配合使用	单支独立无菌包装，10支/盒



微信公众号



官方网站

单腔取卵器

注册证编号：鲁械注准20152180129



产品特点：



笔尖式针头异常锐利，减少疼痛、利于创口恢复。



针头端清晰的显影标记，增强超声下的可视性。



手柄图案凸起指示针尖的斜面方向。




双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

PRODUCT PARAMETER				
产品型号	穿刺针直径(G)	穿刺针长度(cm)	特点及说明	包装
C-351600-SL	16	35	接注射器使用	单支独立无菌包装，10支/盒
C-351700-SL	17	35	接注射器使用	单支独立无菌包装，10支/盒
C-351800-SL	18	35	接注射器使用	单支独立无菌包装，10支/盒



双腔取卵器

注册证编号：鲁械注准20152180129

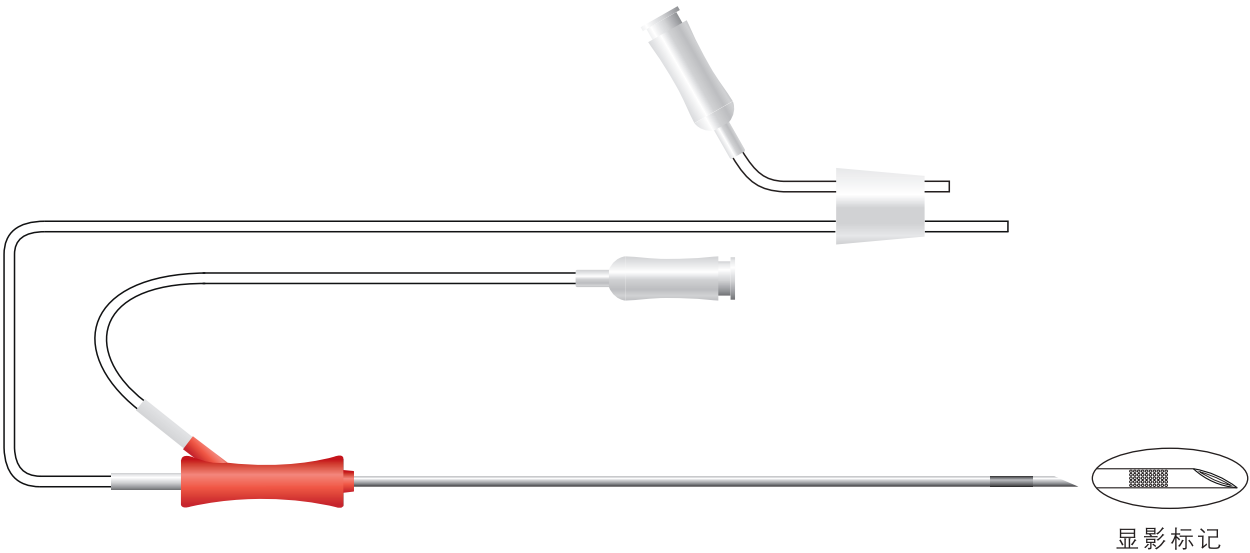

适用范围：

主要用于经腹部或阴道超声引导下穿刺卵泡收集卵子。尤其是卵子收集困难或数量较少时，可提高获卵数。

产品特点：



笔尖式针头异常锐利，减少疼痛、利于创口恢复。



针头端高清晰的显影标记，增强超声下的可视性。



双腔设计，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。



连接管弹性良好，运输或操作中产生折叠后可恢复原状。



双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

PRODUCT PARAMETER						
产品型号	穿刺针直径(G)	穿刺针长度(cm)	收集管长度(cm)	冲洗管长度(cm)	特点及说明	包装
C-351680-PL	16	35	80	100	与负压吸引器配合使用	单支独立无菌包装，10支/盒
C-351780-PL	17	35	80	100	与负压吸引器配合使用	单支独立无菌包装，10支/盒



胚胎移植管


注册证编号：鲁械注准20152180128

适用范围：

用于将胚胎经阴道送达子宫的胚胎移植过程。

产品特点：

- 1.导入管及导管均有刻度标记，以提示进入子宫深度和胚胎放置位置。
- 2.每支产品包装内均配有套芯，有效避免宫颈粘液对移植造成的干扰。
- 3.导入管球形头端预弯形管体设计，更符合人体工程学原理。
- 4.球形头端圆润光滑，可顺畅无创通过宫颈，对子宫的刺激更小。
- 5.带有固定环结构，方便导入管放置定位和固定。
- 6.导管材质柔软光滑，采用内支撑设计，操作更加灵活。
- 7.双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。
- 8.T-1811011-B导管前端带显影标记，超声下能精确观察到移植点，优化了移植条件。

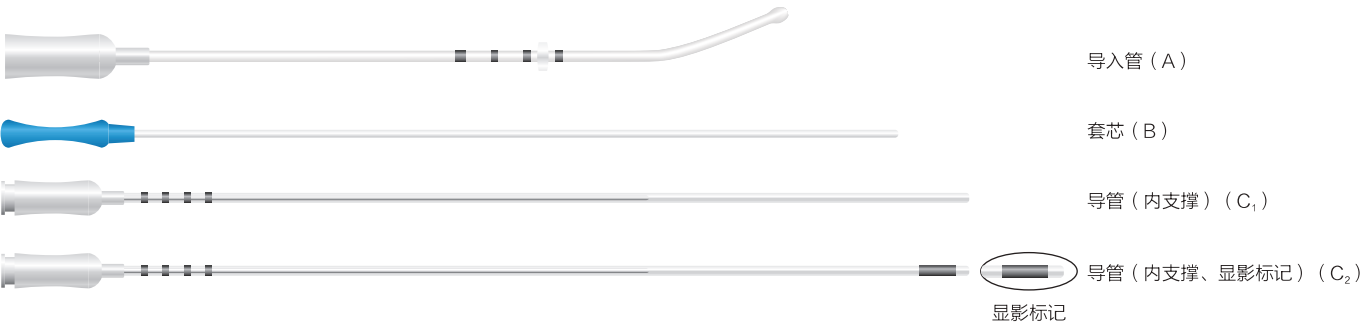


PRODUCT PARAMETER					
产品型号	导入管长度(mm)	导管长度(mm)	特点及说明	组成	包装
T-1811011	170	240	标准、内支撑、套芯	A B C ₁	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1811011-B	170	240	标准、内支撑、套芯、B超下显影	A B C ₂	单支独立无菌包装，10支/盒



胚胎移植管 注册证编号：鲁械注准20152180128

适用范围：
用于将胚胎经阴道送达子宫的胚胎移植过程。

- 产品特点：
- 1.移植过程中前端圆润光滑，可顺畅通过宫颈，对子宫内膜的损伤减到最低。
 - 2.T-1721511-B导管前端带显影标记，超声下能精确观察到移植点，优化了移植条件。
 - 3.导入管及导管均有刻度标记，以提示进入子宫深度和胚胎放置位置。
 - 4.每支产品包装内均配有套芯，用于辅助建立子宫通道，尤其是通过宫颈困难时。
 - 5.双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

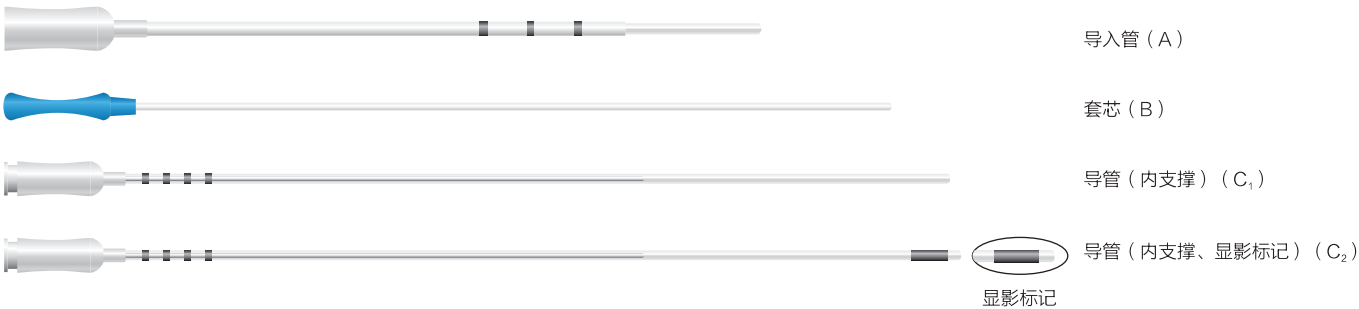

PRODUCT PARAMETER							
产品型号	导入管		导管		特点及说明	组成	包装
	直径(mm)	长度(mm)	直径(mm)	长度(mm)			
T-1721511-B	2.5/2.0	144	1.5	222	标准、内支撑、B超下显影	A B C ₂	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1821011	2.45/1.5	184	1.0	235	标准、内支撑	A B C ₁	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1821011-S	2.2/1.5	154	1.0	222	超柔、内支撑	A B C ₁	单支独立无菌包装，10支/盒



胚胎移植管

注册证编号：鲁械注准20152180128

适用范围：

用于将胚胎经阴道送达子宫的胚胎移植过程。

产品特点：

- 1. 移植过程中前端圆润光滑，可顺畅通过宫颈，对子宫内膜的损伤减到最低。
- 2. 部分型号导管前端带显影标记，超声下能精确观察到移植点，优化了移植条件。
- 3. 导入管及导管均有刻度标记，以提示进入子宫深度和胚胎放置位置。
- 4. 带有固定环结构，方便导入管放置定位和固定。
- 5. 每支产品包装内均配有套芯，用于辅助建立子宫通道，尤其是通过宫颈困难时。
- 6. 双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。



导入管（A）

套芯（B）

导管（内支撑）（C₁）

导管（内支撑、显影标记）（C₂）
显影标记

导管（外支撑）（C₃）

导管（外支撑、显影标记）（C₄）
显影标记

PRODUCT PARAMETER

产品型号	导入管		导管		特点及说明	组成	包装
	直径(mm)	长度(mm)	直径(mm)	长度(mm)			
T-1731511	2.5	144	1.5	222	标准、内支撑	A、B、C ₁	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1731511-B	2.5	144	1.5	222	标准、内支撑、B超下显影	A、B、C ₂	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1831011	2.5	154	1.0	222	标准、内支撑	A、B、C ₁	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1831011-B	2.5	154	1.0	222	标准、内支撑、B超下显影	A、B、C ₂	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1831012	2.5	154	1.0	222	标准、外支撑	A、B、C ₃	单支独立无菌包装，10支/盒
T-1831012-B	2.5	154	1.0	222	标准、外支撑、B超下显影	A、B、C ₄	单支独立无菌包装，10支/盒



微信公众号



官方网站

人工授精移植管

注册证编号：鲁械注准20152180128

适用范围：

用于将精液经阴道送达子宫的精液移植过程。

I-1011-N



产品特点：

- 1.超柔材质，头端开孔。
- 2.导管前端圆润光滑，可顺畅通过宫颈，对子宫内膜的损伤减到最低。
- 3.双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

I-1012-N



产品特点：

- 1.超柔材质，两个侧孔。
- 2.导管前端圆润光滑，可顺畅通过宫颈，对子宫内膜的损伤减到最低。
- 3.手柄图案朝上时，提示侧孔处于导管左右两侧，精子可在输卵管口处释放。
- 4.双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

I-1822-D



产品特点：

- 1.双层材质，两个侧孔。
- 2.导管前端圆润光滑，可顺畅通过宫颈，对子宫内膜的损伤减到最低。
- 3.远端材质柔软，对宫颈和子宫内膜的损伤减到最低；近端刚硬，可控性更好。
- 4.手柄图案朝上时，提示侧孔处于导管左右两侧，精子可在输卵管口处释放。
- 5.每支产品包装内均配有套芯，用于辅助建立子宫通道，尤其是通过宫颈困难时。
- 6.双标签设计，产品关键信息副标签可剥离后直接粘贴于病历。

PRODUCT PARAMETER

产品型号	导管		特点及说明	包装
	直径(mm)	长度(mm)		
I-1011-N	1.8	100	头端开孔	单支独立无菌包装，10支/盒
I-1012-N	1.8	100	两个侧孔	单支独立无菌包装，10支/盒
I-1822-D	2.2/1.8	180	两个侧孔、双层、有套芯	单支独立无菌包装，10支/盒



子宫内膜取样器

注册证编号：鲁械注准20192180791

适用范围：

用于采集子宫内膜细胞样品和组织样本。

产品特点：


- 1.简便：无需探宫和扩宫、简便快捷，门诊可操作。
- 2.无痛：无需麻醉、轻微疼痛感、患者接受度好。
- 3.安全：基本无创、无子宫穿孔及交叉感染风险、无并发症。
- 4.准确：与传统诊刮诊断准确率相似，可用于大部分需诊断性刮宫者。

3型



- 可到达子宫角、输卵管两侧等传统工具难以到达的位置，取样准确率高。
- 套芯含双层密封圈，可保证获取足够的负压，获得充足标本量。

4型

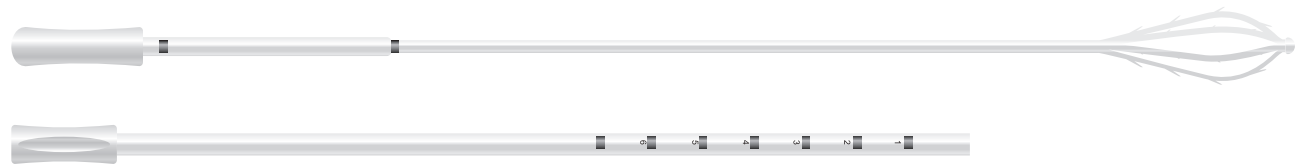

- 套芯形态与子宫腔形态吻合，可360° 覆盖子宫内膜，无取样盲区。
- 套芯上有4个齿状刮片，旋转可达子宫内膜基底层，但不穿过基底层。

PRODUCT PARAMETER					
产品编号	产品型号	产品规格	导入管长度(mm)	导入管外径(mm)	包装
Z324532	3型	Z-32430	245	3.0	单支独立无菌包装，25支/盒
Z415040	4型	Z-41540	150	4.0	单支独立无菌包装，10支/盒



辅助生殖用培养器皿

适用范围：

用于体外环境下收集、操作、培养或储存人类生殖细胞及胚胎。

产品特点：

1.IVF专用设计。 2.独立包装。 3.无菌、无热原、无细胞毒性和胚胎毒性。 4.型号规格齐全，满足专业要求。

培养皿 注册证编号：鲁械注准20192180892



平皿



平皿



平皿



平皿



中心皿



四孔皿

PRODUCT PARAMETER			
产品型号	产品规格	尺寸	包装
平皿	3501	35	1个/袋、280个/箱
	3510	35	10个/袋、500个/箱
平皿	5001	50	1个/袋、320个/箱
	5010	50	10个/袋、500个/箱
平皿	6001	60	1个/袋、200个/箱
	6010	60	10个/袋、500个/箱
平皿	10001	100	1个/袋、120个/箱
	10010	100	10个/袋、200个/箱
中心皿	5501	55	1个/袋、200个/箱
	5510	55	10个/袋、500个/箱
四孔皿	6601	66	1个/袋、200个/箱
	6605	66	5个/袋、200个/箱



微信公众号



官方网站

试管

注册证编号：鲁械注准20192180892



PRODUCT PARAMETER			
产品型号	产品规格	尺寸	包装
试管	0501	5ml	1个/袋、800个/箱
	0510	5ml	10个/袋、500个/箱
	0525	5ml	25个/袋、500个/箱
试管	1401	14ml	1个/袋、400个/箱
	1410	14ml	10个/袋、500个/箱
	1425	14ml	25个/袋、500个/箱
试管	1501	15ml	1个/袋、400个/箱
	1510	15ml	10个/袋、500个/箱
	1525	15ml	25个/袋、500个/箱

样品杯

注册证编号：鲁械注准20192180892



PRODUCT PARAMETER			
产品型号	产品规格	尺寸	包装
样品杯	1102	60mm×63mm	1个/袋、200个/箱



辅助生殖用显微操作管及吸管

巴氏吸管 注册证编号：鲁械注准20192180723



适用范围：用于辅助生殖技术中液体、卵子、精子或胚胎的转移。

产品特点：
管壁厚、强度高。

PRODUCT PARAMETER					
产品型号	产品编号	产品规格	产品总长度	产品说明	包装
巴氏吸管 I	PP I 1450	PP I -145	14.5cm (± 1cm)	5.75in, 不带棉塞	无菌包装, 5支/包, 40包/盒
巴氏吸管 I	PP I 2250	PP I -225	22.5cm (± 1cm)	9in, 不带棉塞	无菌包装, 5支/包, 40包/盒
巴氏吸管 II	PP II 1450	PP II -145	14.5cm (± 1cm)	5.75in, 带棉塞	无菌包装, 5支/包, 40包/盒
巴氏吸管 II	PP II 2250	PP II -225	22.5cm (± 1cm)	9in, 带棉塞	无菌包装, 5支/包, 40包/盒



玻化冷冻载体

注册证编号：鲁械注准20212181181

I 型




II 型



适用范围：用于储存经玻璃化冷冻的人卵母细胞和胚胎。

产品特点：

- 1.采用表面处理专利技术，胚胎附着力好。
- 2.保护套与持柄配合性良好，在液氮内不易开裂与分离。
- 3.I 型保护套底端有金属配重，防止在液氮内漂浮；
II 型保护套底端封闭设计。
- 4.手柄图案指示黑色标记面相反方向。
- 5.无菌，经生物学评价合格。
- 6.多种颜色，便于区分。

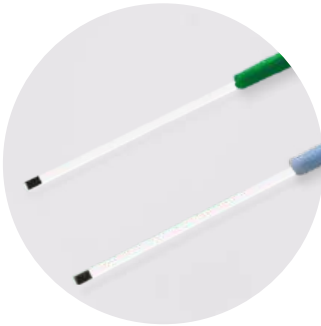

PRODUCT PARAMETER			
产品型号	产品规格	颜色	包装
I 型	B-111	● 红	1支/包
I 型	B-112	● 黄	1支/包
I 型	B-113	● 蓝	1支/包
I 型	B-114	● 绿	1支/包
I 型	B-115	○ 白	1支/包
I 型	B-153	● 蓝	5支/包
I 型	B-156	红、黄、蓝、绿、白	5支/包
II型	B-211	● 红	1支/包
II型	B-212	● 黄	1支/包
II型	B-213	● 蓝	1支/包
II型	B-214	● 绿	1支/包
II型	B-215	○ 白	1支/包
II型	B-251	● 红	5支/包
II型	B-252	● 黄	5支/包
II型	B-253	● 蓝	5支/包
II型	B-254	● 绿	5支/包
II型	B-255	○ 白	5支/包
II型	B-256	红、黄、蓝、绿、白	5支/包



微信公众号



官方网站

恒温器

注册证编号：鲁械注准20212180644

适用范围：用于辅助生殖过程中维持配子和胚胎的温度。

MT-06/MT-12

用于取卵过程中维持试管内卵母细胞的温度，可容纳6支/12支14ml试管。

- 产品特点：**
- 1.前后可视，便于观察。
 - 2.设定温度与实际温度同时显示。
 - 3.一体化设计，温度传导均匀，并能防止液体浸入仪器内部。
 - 4.前后面板磁吸式固定，可快速拆装，便于清洁消毒。



MP-300

放置在超净工作台台面上，维持培养器皿内配子和胚胎的温度。

- 产品特点：**
- 1.金属恒温板边缘防滑落设计。
 - 2.设定温度与实际温度同时显示。
 - 3.较大的工作表面，易于操作。
 - 4.表面温度均匀。



GP-200

放置在体视显微镜载物台上，维持培养器皿内配子和胚胎的温度。

- 产品特点：**
- 1.相对较大的加热面积，保证了较大的操作区域。
 - 2.设定温度与实际温度同时显示。
 - 3.特殊的加热玻璃，温度均匀；透光率高，易于观察。
 - 4.通用于市面现有显微镜品牌。



GP-110

放置在倒置显微镜载物台上，维持培养器皿内配子和胚胎的温度。

- 产品特点：**
- 1.相对较大的加热面积，保证了较大的操作区域。
 - 2.设定温度与实际温度同时显示。
 - 3.特殊的加热玻璃，温度均匀；透光率高，易于观察。
 - 4.通用于市面现有显微镜品牌。



PRODUCT PARAMETER

产品型号	MT-06	MT-12	MP-300	GP-200	GP-110
容量	6孔	12孔	—	—	—
外形尺寸(mm)	220×60×140	220×60×140	200×300×20	200×180×8	Φ110
温度设置范围	+33.0℃~+39.9℃	+33.0℃~+39.9℃	+33.0℃~+39.9℃	+36.5℃~+38.5℃	+36.5℃~+38.5℃
显示精度	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
温度显示	设定/实际双显示	设定/实际双显示	设定/实际双显示	设定/实际双显示	设定/实际双显示
提示功能	当实际温度高于设定温度1℃时，指示灯常亮，直至超温解除。				

